


wellion[®] **SENSOR**

10
DŇÍ

**SYSTÉM NA KONTINUÁLNE
MONITOROVANIE GLUKÓZY (CGMS)**

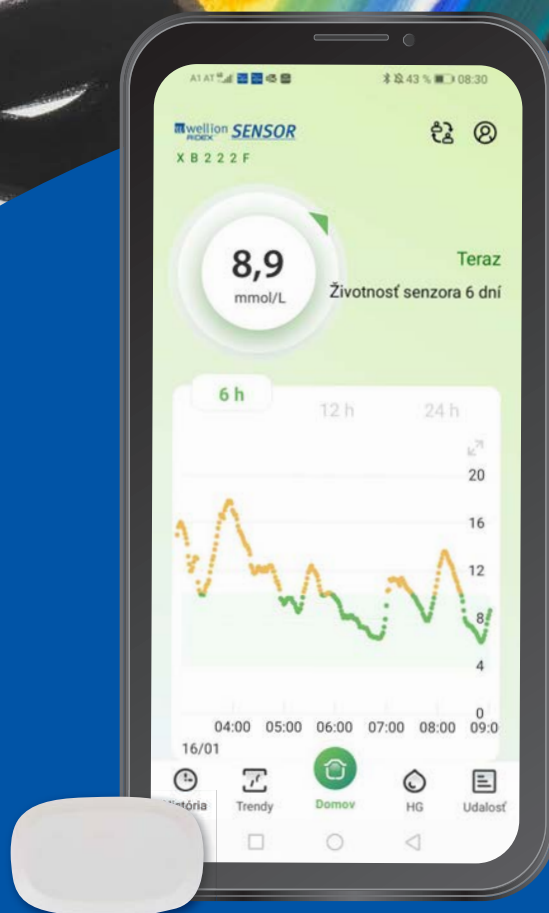


wellion[®] **SENSOR**

**SYSTÉM NA KONTINUÁLNE
MONITOROVANIE GLUKÓZY (CGMS)**


Rozhodujem o svojom živote

Rozhodnite sa sami, kedy chcete senzor nosiť!

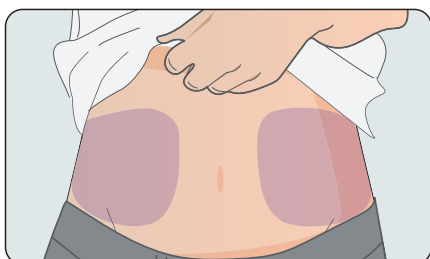


Senzor Wellion[®] možno upevniť na rôzne časti tela tak, aby to zodpovedalo Vášmu rozvrhu alebo oblečeniu (napr. brucho, rameno...).

ZAČNITE JEDNODUCHO

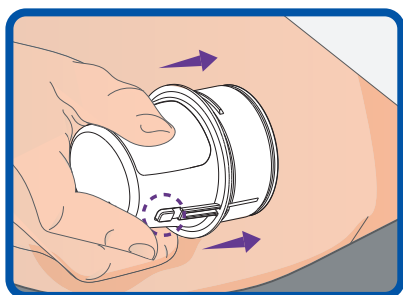


1

Priložte aplikátor

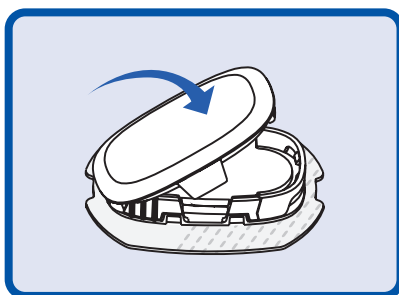

2

Upevnite vysielac do držiaka
senzora

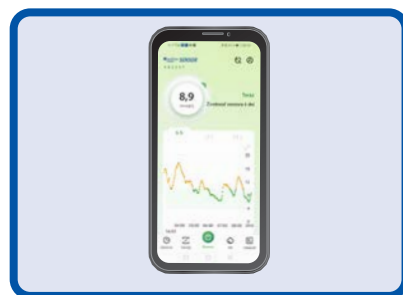


3

Odčítajte výsledky glukózy

Vaša RAKÚSKA značka pre zdravie

DISKRÉTNE URČENIE VAŠEJ HLADINY GLUKÓZY

Vďaka tomu, že je malý a plochý, a vďaka vhodne zvolenej časti tela môže byť nosenie CGMS senzora veľmi diskkrétne.

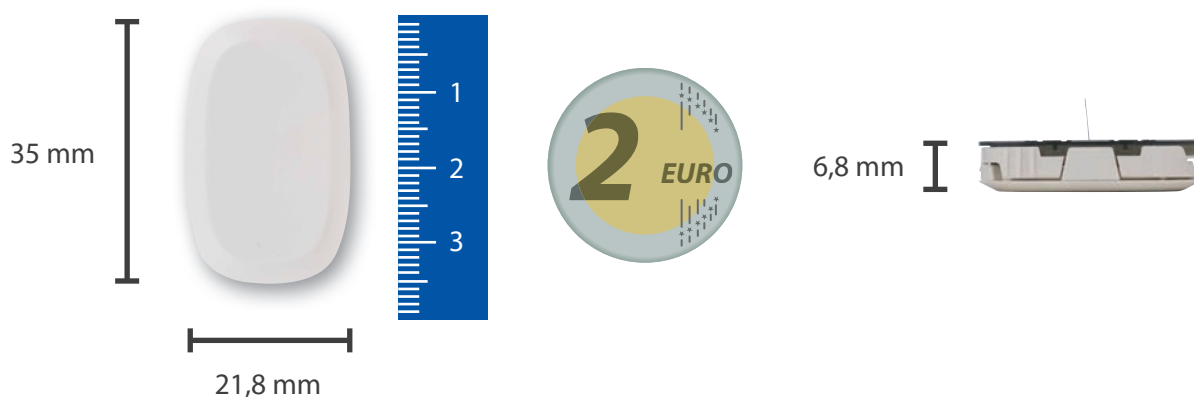

Stanovte si hodnotu glukózy pohodlne a diskkrétne aj na ceste.
Vďaka bezdrôtovému prenosu údajov si svoje hodnoty môžete prezerať rýchlo a jednoducho.



Bluetooth
(2 Metre)



Info: V prípade ak sa prijímač nachádzal mimo rozsahu prijímania, údaje sa automaticky doplnia po opätovnom pripojení.

wellion[®] ***SENSOR***

**SYSTÉM NA KONTINUÁLNE
MONITOROVANIE GLUKÓZY (CGMS)**

JEDNODUCHÁ VÝMENA ÚDAJOV

Hneď ako je **senzor Wellion[®]** pripevnený k telu, meria trvalo a automaticky vašu hladinu glukózy.

Orientácia v ponuke aplikácie **Wellion AiDEX SENSOR App** je pôsobivo intuitívna a umožňuje podrobnú správu údajov.



ŠETRITÉ VYUŽÍVANIE ZDROJOV A PRESNOSŤ

Wellion[®] SENSOR treba vymieňať aspoň raz za 10 dní. Vysielač sa dá použiť opakovane.

Vaša RAKÚSKA značka pre zdravie

VŠETKO PORUKE

S aplikáciou **Wellion® AiDEX SENSOR App** si môžete výsledok merania pozrieť veľmi jednoducho – je dostupná pre Android a iOS. Aplikácia zbiera všetky dôležité údaje súvisiace s Vaším diabetom.

Nastavte si svoj **individuálny cieľový rozsah glukózy** – ak nameraná hodnota glukózy prekročí alebo klesne pod váš cieľový rozsah, spustí sa **alarm**.

Podrobná správa CGM vo formáte PDF pre ošetrojúceho lekára.

Funkcia zdieľania umožňuje osobám, ktorým dôverujete, nahliadnuť do Vašich výsledkov merania hladiny glukózy v krvi. Môžete tak zlepšiť svoje zvládanie diabetu a užívať si život bez obáv vďaka funkcii varovania.

Ak nechcete používať aplikáciu, požiadajte lekára o samostatný prístroj Wellion® SENSOR PDA (prenosný asistent pre diabetes).



Správa CGM

Základné informácie

Meno: --
Typ diabetu: --
Email: --


Pohlavie: žena
Výška: --
Sériové číslo: AH0K2N

Vek: --
Hmotnosť: --

Hlavné parametre štandardizovanej správy CGM

Položka	Jednotka	Výsledky	Referenčná hodnota
Hodnotený dni CGM	Deň (dni)	7	>14
Čas pokrytia CGM	%	38,69	>70
eHbA1c	%	4,62	<7
MBG (priemerná hladina glukózy)	mmol/L	4,9	4,3-6,6
CV	%	10,15 ↓	18-36

Čas strávený v cieľovom rozmedzí (TIR)

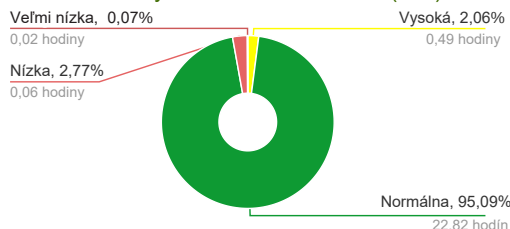

- Veľmi vysoká: čas strávený nad cieľovým rozmedzím (TAR): >13,9mmol/L
- Vysoká: čas strávený nad cieľovým rozmedzím (TAR): 10-13,9mmol/L
- Normálna: čas strávený v cieľovom rozmedzí (TIR): 3,9-10mmol/L
- Nízka: čas strávený pod cieľovým rozmedzím (TBR): 3-3,9mmol/L
- Veľmi nízka: čas strávený pod cieľovým rozmedzím (TBR): < 3mmol/L

wellion[®] **SENSOR**

**SYSTÉM NA KONTINUÁLNE
MONITOROVANIE GLUKÓZY (CGMS)**

ŠPECIFIKÁCIE

	Vysielač	Senzor
Prevádzková teplota	5-40°C (41-104°F)	
Prevádzková vlhkosť	10-93% (nekondenzačná)	
Skladovacia a prepravná teplota	-20 - 60°C	4 - 30°C
Skladovacia a prepravná vlhkosť	5-95% (nekondenzačná)	
Stupeň ochrany krytom	IP48: Ochrana proti krátkodobému vystaveniu vode (do hĺbky 2 metrov po dobu 60 min)	
Doba použiteľnosti	Opätovne použiteľný	10 dní
Detekčné rozmedzie	2 mmol/L - 25 mmol/L	
Hmotnosť	< 5,5 g	
Spojenie senzor ↔ aplikácia	Bluetooth	
MARD (brucho, nadlaktie)	9,1 %	



**Wellion® AiDEX
SENSOR App**



**Základňa senzora +
vysielač Wellion®**



Vaša RAKÚSKA značka pre zdravie

VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD



Kontinuálne meranie glukózy každých 5 minút – 288 výsledkov merania denne



Čas zahriatia je iba 1 hodina



Bez potreby kalibrácie



Wellion® SENSOR je vodotesný (plávanie, sprchovanie)



Namerané hodnoty sa automaticky prenášajú do aplikácie/PDA




Bezbolestné meranie



Zdieľanie a sledovanie

Môžete si život prispôbiť vlastným potrebám:

počas pohybu, spánku, hier či športovania

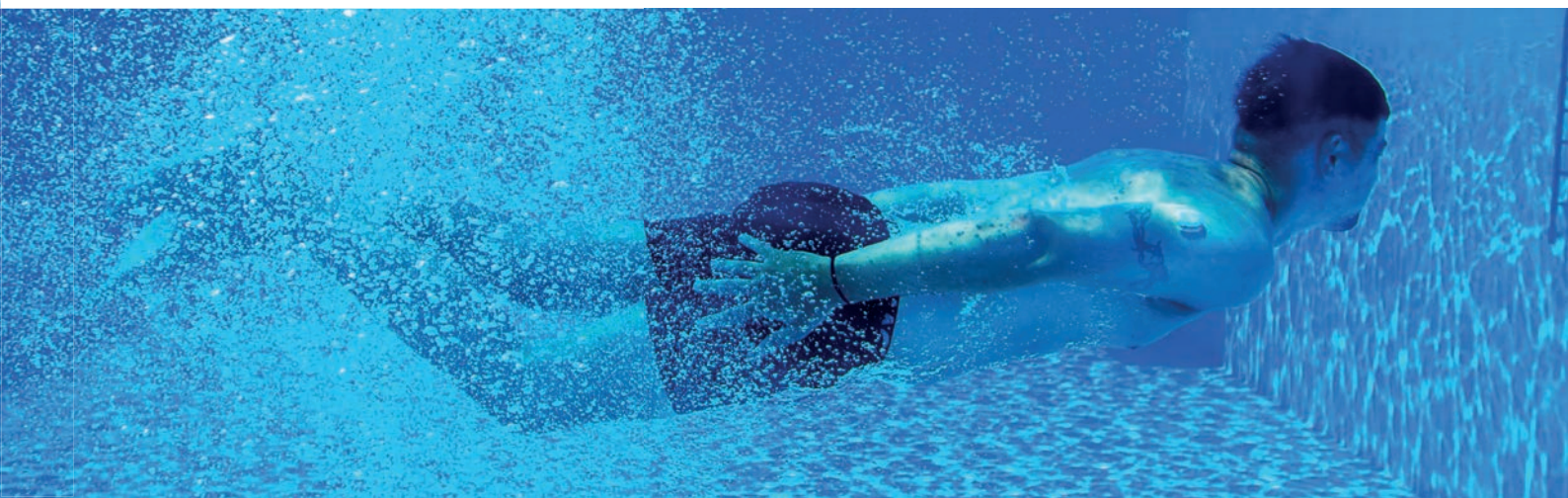

wellion[®] SENSOR



Vaša
RAKÚSKA
značka pre zdravie

**SYSTÉM NA KONTINUÁLNE
MONITOROVANIE GLUKÓZY (CGMS)**

VÝHODY NÁŠHO SENZORA WELLION



vodotesnosť



10-dňový senzor



automatický prenos údajov



meranie v reálnom čase



flexibilný životný štýl



ľahko použiteľný PDA



kontinuálne meranie glukózy



bez kalibrácie



Wellion[®] AiDEX
SENSOR App



Objednajte si priamo od MED TRUST

0910 46 30 65 • office@medtrust.sk



Servis a predaj:



MED TRUST Slovakia, s.r.o.

Popradská 80

821 06 Bratislava, Slovensko

Tel.: 0910 46 30 65

www.wellion.sk

E-Mail: office@medtrust.sk